




ALBAcheck® - BGS Reagente di controllo per anti-D

REF Z271

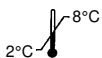

IVD

CE
1434

INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI

LOT

Numero del lotto



Scadenza (aaaa-mm-gg)



Temperatura di conservazione (2°C–8°C)

IVD

Dispositivo medico diagnostico *in vitro*



Leggere le istruzioni per l'uso

www.quotientbd.com



Produttore

REF

Codice prodotto

INTRODUZIONE

Poiché alcuni reagenti monoclonali Anti-D sono potenziati per l'utilizzo, l'impiego di un controllo per il reagente è essenziale.

Questo reagente è destinato all'uso come controllo negativo in abbinamento ai seguenti prodotti Anti-D Quotient: Z031, Z039, Z041.

UTILIZZAZIONE PREVISTA

ALBAcheck®-BGS reagente di controllo per anti-D è inteso come controllo negativo delle prove effettuate con i reagenti monoclonali Quotient anti-D.

DESCRIZIONE DEL REAGENTE

Il reagente è formulato similmente ai reagenti monoclonali anti-D Quotient Z031, Z039, Z041. Il reagente contiene anche EDTA e 1 g/L di azoturo di sodio.

Il volume del liquido erogato dal contagocce è di circa 40 µL. Il giusto rapporto tra eritrociti e siero deve sempre essere mantenuto nelle prove.

Il reagente è conforme alle prescrizioni della direttiva 98/79/CE per i dispositivi medici diagnostici *in vitro* e alle raccomandazioni del Servizio trasfusionale del Regno Unito.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il reagente deve essere conservato tra 2 e 8°C. Non usare se torbido. Non diluire. Il reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

PRECAUZIONI D'UTILIZZO

Il reagente contiene lo 0,1% di azoturo di sodio. Può reagire con il piombo o il rame delle tubazioni formando sali esplosivi; smaltire con acqua in eccesso.

Nocivo per la vita acquatica, con effetti di lunga durata Evitare il rilascio nell'ambiente. Smaltire il contenuto / il contenitore in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

Il prodotto è per uso professionale esclusivo *in vitro*.

PROCEDURE DI PROVA

Informazioni generali

ALBAcheck®-BGS reagente di controllo per anti-D è inteso come sostituto dei reagenti monoclonali anti-D da controllare e deve essere usato con le stesse modalità di prova degli stessi.

CONTROLLO QUALITÀ

Questo è un reagente di controllo e le sue caratteristiche soddisfacenti quando usato con le tecniche raccomandate rappresentano un adeguato livello di controllo.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI PRESTAZIONI

Negli studi di valutazione delle prestazioni, ALBAcheck®-BGS Controllo Reagente per Anti-D è stato testato nei confronti di globuli rossi ben caratterizzati.

Le prestazioni di ALBAcheck®-BGS Controllo Reagente per Anti-D hanno dimostrato una concordanza del 100% agli esiti previsti del test.


LIMITAZIONI

Risultati falsi positivi o falsi negativi possono verificarsi a causa di contaminazione dei materiali di prova, temperatura di reazione impropria, stoccaggio improprio di materiali e omissione di reagenti.

DATA DI PUBBLICAZIONE

2024-05

Per ulteriori informazioni o consigli si prega di contattare il distributore locale.

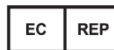

Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



Alba Bioscience Limited
James Hamilton Way
Penicuik
EH26 0BF, UK

Tel: +44 (0) 131 357 3333
Fax: +44 (0) 131 445 7125
E-mail: customer.serviceEU@quotientbd.com

© Alba Bioscience Limited 2024

Z271PI/IT/08